

SIEMENS



Pure binax™

Notendahandbók

www.siemens.com/hearing



Lífið hljómar dásamlega skýrt.

Efnisyfirlit

Velkomin	4
Heyrnartækin þín	5
Gerð heyrnartækjanna	5
Fyrstu kynni af heyrnartækjunum	5
Einstakir hlutar og heiti	6
Stjórnntæki	8
Stillingar	10
Rafhlöður	12
Stærð rafhlöðu og leiðbeiningar um meðferð hennar	12
Skipt um rafhlöður	13
Hleðslurafhlöður	14
Dagleg notkun	15
Að kveikja og slökkva	15
Heyrnartækin sett á og tekin af	17
Styrkstillir	20
Kerfishnappur	21
Fleiri stillingar (valkvæðar)	21
Sérstakar aðstæður til hlustunar	22
Stilling á stefnuvirkni (valkostur)	22
Í símanum	24
Tónmökvar fyrir hljóð	26

Viðhald og umhirða	27
Heyrnartæki	27
Kúplar	28
Viðhald fagmanna	30
Aðrar upplýsingar	31
Þráðlaus virkni	31
Fylgihlutir	31
Táknin sem notuð eru í þessum bæklingi	32
Bilanagreining	32
Þjónustu-upplýsingar	34
Sérstakar landsupplýsingar	35

Velkomin

Bestu þakkir fyrir að velja Siemens heyrnartæki til að fylgja þér í daglega lífinu. Það er eins og með allar nýjungar að það getur tekið þig dálítinn tíma að venjast þeim.

Þessar leiðbeiningar ásamt stuðningi frá heyrnarfræðingi hjálpa þér að gera þér grein fyrir þeim kostum og betri lífsgæðum sem heyrnartækin bjóða upp á.

Til þess að þú fáiir sem mest út úr heyrnartækjunum mælum við með að þú notir þau á hverjum degi, allan daginn. Það hjálpar þér að venjast þeim.



AÐVÖRUN

Það er mjög mikilvægt að þú lesir þessa notendahandbók og öryggishandbókina vandlega og til fulls. Farðu alltaf eftir öryggisupplýsingunum til að komast hjá skemmdum eða slysum.

Heyrnartækin þín

i

Þessar leiðbeiningar innihalda lýsingu á ýmsum valkostum sem heyrnartækin eru með eða eru hugsanlega ekki með.

Fáðu upplýsingar hjá heyrnarfræðingi sem getur sýnt þér hvaða atriði eiga við um þín heyrnartæki.

Gerð heyrnartækjanna

Heyrnartækin þín eru með hátalara í hlust. Hátalaranum er komið fyrir í hlustinni og tengdur við heyrnartækið með leiðslu. Þessi heyrnartæki eru ekki ætluð fyrir ungbörn, lítil börn eða þroskaskerta einstaklinga.


Fyrstu kynni af heyrnartækjunum

Við mælum með því að þú kynnir þér heyrnartækin vandlega. Haltu á þeim í lófanum og prófaðu að nota stjórnartækin og taktu eftir því hvar þau eru staðsett á tækinu. Þannig verður auðveldara fyrir þig að finna og ýta á stjórnartækin meðan þú ert með heyrnartækin á þér.

i




Ef þú átt í vandræðum með að ýta á stjórnartækin á heyrnartækjunum meðan þú ert með þau á þér skaltu tala við heyrnarfræðing í sambandi við fjarstýringu.

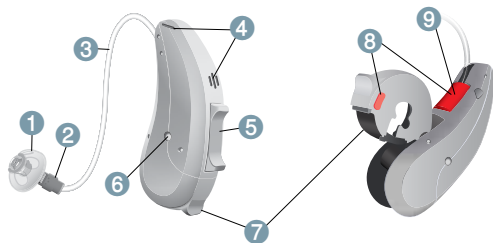Einstakir hlutar og heiti





-
- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Hlústarstycki | 6 Hleðslutengi (valkostur) |
| 2 Hátalari | 7 Rafhlöðuhólf |
| 3 Hátalarasnúra | 8 Auðkenni tækis:
Rautt = hægra eyra
Blátt = vinstra eyra |
| 4 Hljóðnemar | 9 Hátalarafesting |
| 5 Styrkstillir eða kerfishnappur | |
-

Þú getur notað staðlaða kúpla eða sérsmíðaðar skeljar.

Stöðluð hlustarstykki		Stærð
<input type="checkbox"/>		Click Dome™ stakur (opinn eða lokaður)
<input type="checkbox"/>		Click Dome hálfopinn
<input type="checkbox"/>		Click Dome tvöfaldur

Það er auðvelt að skipta um staðlaða kúpla.



Nánari upplýsingar í kaflanum „Viðhald og umhirða“.

Sérsmíðaðar skeljar		
<input type="checkbox"/>		Sérsníðuð skel
<input type="checkbox"/>		Click Mold™ (smelluskel)

Stjórtæki

Með stjórtækjunum er til dæmis hægt að stilla hljóðstyrk eða skipta milli aðgerða. Heyrnartækin eru annað hvort með þrýstihnappi eða veltirofa - eða engum stjórtækjum.

Heyrnarfræðingur stillir hnappinn með aðgerðum sem þú kýst.

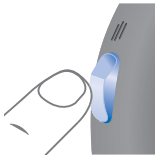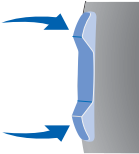Stjórtæki	Vinstra megin	Hægra megin
þrýstihnappur 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veltirofi 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Engin stjórnun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Þú getur einnig notað fjarstýringu.

Virgni þrýstihnappsins	L	R
Ýttu stutt:		
Skipt um forrit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hækka hljóðstyrk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lækka hljóðstyrk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hljóðstyrkur fyrir suð upp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hljóðstyrkur fyrir suð niður	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ýttu lengi:		
Í bið/kveikja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L = vinstri, R = hægri

Virknir veltirofans	L	R
Ýttu stutt:		
Kerfi upp/niður	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Styrkur upp/niður	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hljóðstyrkur fyrir suð upp/niður	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jafnvægi hljóðs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stefnumiðun (stilling á rýmdartilfinningu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ýttu lengi:		
Í bið/kveikja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forrit upp/niður	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ýttu mjög lengi:		
Í bið/kveikja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L = vinstri, R = hægri

Stillingar

Heyrnarforrit
1
2
3
4
5
6
Nánari upplýsingar í kaflanum „Skipt um hlustunarkerfi“.

Helstu atriði

- Töf á ræsingu** hægt er að setja heyrnartækin í án ískurs.
Nánari upplýsingar í kaflanum „Kveikt og slökkt á tækinu“.

- AutoPhone™** skiptir sjálfkrafa á símaforritið þegar símtólið kemur nálægt eyranu.
Nánari upplýsingar í kaflanum „Í símanum“.

- Hljóðgjafinn fyrir eyrnasuð** myndar dauft hljóð sem beinir athygli þinni frá eyrnasuðinu.

- Rafhlöðurnar á heyrnartækjum með **hleðslutengi** eru hlaðnar með því að setja tækið einfaldlega í hleðslutækið. Þegar hleðslunni er lokið fjarlægir hleðslutækið raka úr heyrnartækjunum.

- Með **e2e þráðlausri** virkni er hægt að stjórna báðum heyrnartækjunum samtímis.
Nánari upplýsingar í liðnum „Þráðlaus virkni“.

Rafhlöður

Þegar hleðsla rafhlöðunnar er orðin lítil dofna hljóðið eða þú heyrir viðvörðunarkerki. Það fer eftir gerð rafhlöðunnar hve langan tíma þú hefur til að skipta um rafhlöðu eða hlaða hana.

Stærð rafhlöðu og leiðbeiningar um meðferð hennar

Fáðu nánari upplýsingar hjá heyrnarfræðingi um rafhlöðurnar sem mælt er með.

Stærð rafhlöðu:	312
-----------------	-----

- Notaðu alltaf rétta stærð af rafhlöðu fyrir heyrnartækin.
- Ef þú ætlar ekki að nota heyrnartækin í nokkra daga skaltu taka rafhlöðurnar úr þeim.
- Vertu alltaf með rafhlöður til vara.
- Taktu tómar rafhlöður strax úr og farðu eftir staðbundnum reglum um förgun þeirra.


Skipt um rafhlöður

Rafhlaðan tekin úr:

- ▶ Opnaðu rafhlöðuhólfið.



- ▶ Notaðu segulpinnann til að ná rafhlöðunni út. Segulpinninn er fánlegur sem aukabúnaður.

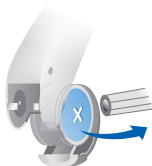

Rafhlaðan sett í:

- ▶ Ef táknið er fjarlægja orð á rafhlöðunni skal ekki taka hann af fyrr en þú ætlar að nota rafhlöðuna.



- ▶ Settu rafhlöðuna í þannig að „+“ táknið snúi upp (sjá mynd).



- ▶ Lokaðu rafhlöðuhólfinu varlega. Ef þú finnur mótstöðu þá er rafhlaðan ekki rétt sett í.

Reyndu ekki að loka rafhlöðuhólfinu með afli. Það gæti skemmst.

Hleðslurafhlöður

Það þarf að hlaða hleðslurafhlöður áður en þær eru notaðar í fyrsta sinn.

- ▶ Farðu eftir leiðbeiningunum um notkun á hleðslutækinu til að hlaða rafhlöðurnar.

Eftir margar hleðslur getur endingartími rafhlöðunnar minnkað. Ef vart verður við þetta skaltu skipta hleðslurafhlöðunni út og setja nýja í staðinn. Við þá skaltu fara eftir leiðbeiningunum um útskipti á rafhlöðum.

Dagleg notkun

Að kveikja og slökkva

Hægt er að kveikja og slökkva á heyrnartækjunum á nokkra mismunandi vegu.

Með rafhlöðuhólfinu:

- ▶ Kveikt: Lokaðu rafhlöðuhólfinu.
Tækin stillast á **sjálfgefinn** styrk og hlustunarkerfi.
- ▶ Slökkt: Opnaðu rafhlöðuhólfið að fyrsta haki.

Að hleðslu lokinni:

- ▶ Kveikt: Taktu tækin úr hleðslutækinu.
Tækin stillast á **sjálfgefinn** styrk og hlustunarkerfi.

Með þrýstihnappi eða veltirofa:

- ▶ Kveikt eða slökkt: Ýttu á þrýstihnappinn eða veltirofann og haltu honum niðri í nokkrar sekúndur. Sjá kaflann „Stjórn tæki“ um stillingar stjórn tækjanna.
Þegar kveikt er á tækinu er áfram stillt á þann styrk og hlustunarkerfi sem **síðast** var stillt á.

Með fjarstýringu:

- ▶ Farðu eftir leiðbeiningunum í notendahandbók fjarstýringarinnar.

Þegar kveikt er á tækinu er áfram stillt á þann styrk og **heyrnarforrit** sem **síðast** var stillt á.

Þegar þú ert með heyrnartækin getur viðvörunarhljóð heyrst þegar kveikt er eða slökkt á heyrnartæki.

Ef **ræsingartöf** er virk kveikja heyrnartækin á sér eftir nokkurra sekúndna töf. Þetta gefur þér tíma til að setja heyrnartækin í eyrun án þess að óþægilegt ískur heyrst vegna samverkunar hljóðnemans og hátalarans.

Heyrnarfræðingur getur virkjað „ræsingartöfina“ fyrir þig.

Heyrnartækin sett á og tekin af

Heyrnartækin eru fínstillt fyrir vinstra og hægra eyra. Merki í lit sýna hvorum megin þau eiga að vera:

- rautt merki = hægra eyra
- blátt merki = vinstra eyra




Heyrnartækið sett í:

- ▶ Haltu um krókinn við hátalaratenginuna.
- ▶ Þrýstu hátalaranum varlega inn í hlustina ①.
- ▶ Snúðu honum örlítið til þannig að hann sitji þægilega.

Opnaðu munninn og lokaðu honum til að koma í veg fyrir að loft safnist upp í hlustinni.

- ▶ Lyftu upp heyrnartækinu og færðu það yfir eyrað ②.

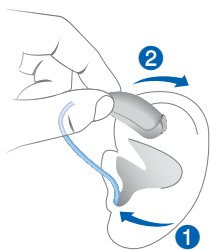

AÐVÖRUN

Hætta á meiðslum!


- ▶ Settu **eyrnatappann** varlega og ekki of langt inn í hlustina.

i

- Það getur verið hentugt að setja **hægra** heyrnartækið í með **hægri** hendi og **vinstra** heyrnartækið með **vinstri** hendi.
- Ef þú átt í vandræðum með að setja **hlustarstykkið** í notaðu hina hendina til að toga eyrnasnepilinn varlega niður á við. Þetta opnar hlustina og auðveldara verður að koma **hlustarstykkinu** fyrir.


Hægt er að fá **festipráð** sem aukabúnað til að halda hlustarstykkinu í eyranu. **Festipráðurinn** er sett í sem hér segir:

- ▶ Beygðu **festipráðinn** og komdu honum vandlega fyrir neðst í eyrnaskálinni (sjá mynd).

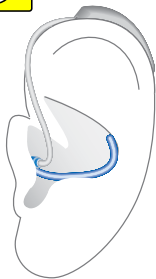

Heyrnartækið tekið úr:

- ▶ Lyftu upp heyrnartækinu og færðu það yfir eyrað ①.
- ▶ Ef heyrnartækið er með sérsníðaða skel eða smelluskel (click mould) er það tekið úr með því að toga í litla strenginn sem er aftan á skelinni.

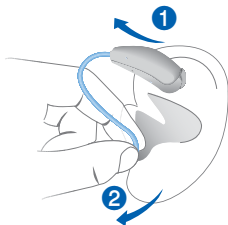

- ▶ Öll önnur heyrnartæki: Taktu um hátalarann í hlustinni með tveimur fingrum og dragðu hann varlega út ②.

Togaðu ekki í hátalarasnúruna.



AÐVÖRUN

Hætta á meiðslum!

- ▶ Í mjög sjaldgæfum tilfellum gæti kúpullinn orðið eftir í eyranu þegar heyrnartækið er tekið af. Ef þetta kemur fyrir þarf að láta heilbrigðisstarfsmann fjarlægja kúpulinn.

Eftir notkun þarf að þrifa heyrnartækin og þurrka þau. Nánari upplýsingar í kaflanum „Viðhald og umhirða“.

Styrkstillir

Heyrnartækin stilla hljóðstyrkinn sjálfkrafa eftir hlustunaraðstæðum.

- ▶ Ef þú villt stilla styrkinn skaltu þrýsta stutt á þrýstihnappinn eða veltirofann eða nota fjarstýringu.

Sjá kaflann „Stjórntæki“ um stillingar stjórntækjanna.

Valkvætt hljóðmerki getur gefið til kynna breytingu á hljóðstyrknum. Þegar stillt hefur verið á mesta eða minnsta hljóðstyrk getur heyrst valkvætt hljóðmerki.

Kerfishnappur

Heyrnartækin stilla hljóðið sjálfkrafa eftir aðstæðum fyrir hlustun hverju sinni.

Heyrnartækin geta auk þess verið með ýmis hlustunarkerfi sem þú getur notað til að breyta hljóðinu ef með þarf. Valkvætt hljóðmerki getur gefið til kynna breytingu á forritinu.

- ▶ Ef þú villt breyta hlustunarkerfinu skaltu ýta á þrýstihnappinn eða veltirofann eða nota fjarstýringu.

Sjá kaflann „Stjórntæki“ um stillingar stjórntækjanna.

Sjá kaflann „Stillingar“ **um lista hlustunarkerfi.**

i

Ef AutoPhone möguleikinn er virkjaður skiptir hlustunarkerfið sjálfkrafa yfir í símaforrit þegar símtólið er í grennd við eyrað.

Nánari upplýsingar í kaflanum „Í símanum“.

Fleiri stillingar (valkvæðar)

Einnig er hægt að nota stjórntæki heyrnartækjanna til að breyta hljóðstillingu eða styrk hljóðsins gegn eyrnasuði, svo dæmi séu tekin. Með hljóðstillingu er hægt að stilla bassa og hátóna að vild.

Sjá kaflann „Stjórntæki“ um stillingar stjórntækjanna.

Sérstakar aðstæður til hlustunar

Stilling á stefnuvirkni (valkostur)

Ef þú vilt beina hlustun meira að viðmælanda þínum fyrir framan þig eða ef þú ætlar að hlusta í víðara rými – getur stillingin fyrir rýmd gert þér kleift að stjórna þessum atriðum að vild.

Hægt er að velja mismunandi stig – allt frá „stefna fram á við“ (mynd til vinstri) til „stefna að miðju“ (mynd í miðjunni) og „hlusta allt um kring“ (mynd til hægri).



Forsendur:

- Þú þarft að vera með tvö heyrnartæki.
- Veltihnappurinn á öðru heyrnartækinu þarf að vera stilltur á rýmdarstillinguna.

Sjá kaflann „Stjórntæki“ um stillingar veltirofans.

Enn fleiri valkostir eru til staðar ef notuð er viðeigandi fjarstýring eða snjallsími.

Stilling handvirk:

- ▶ Ef þú ert með nokkur hlustunarforrit þá skiptu á hlustunarkerfi 1.
- ▶ Ýttu á veltirofann sem er stilltur fyrir þessa aðgerð. Sjálfgefin stilling er á miðstyrk.
- ▶ Ýttu á efri veltirofann til að skerpa hljóðmyndina fram á við og á neðri rofann til að hlusta á breiðari hljóðmynd.

Þessi aðgerð er ætluð til þess að hlusta á einstaka og tímabundna hlustun. Heyrnartækin fara aftur sjálfkrafa í sjálfgefna stillingu á kerfi 1 ef hljóðumhverfið breytist umtalsvert eða eftir um 45 mínútur. Einnig er hægt að fara út úr þessari stillingu þarf að ath skil ekki alveg hvað er átt við.




þarf að ath veit ekki alveg hvað er átt við:

- ▶ Ýttu á rofann í hæsta eða lægsta styrk. Valkvætt hljóðmerki getur gefið til kynna hæsta eða lægsta styrk.
- ▶ Ýttu eitt skref í viðbót. Sama hljóðmerkið heyrir og fyrir breytingar á hlustunarkerfinu sem gefur til kynna að þú hafir nú farið út úr stillingunni fyrir breytingu á hljóðmynd.

Í símanum

Þegar þú talar í símann skaltu halda heyrnartólinu rétt ofan við eyrað. Heyrnartækið og símtólið þurfa að vera samstillt. Snúðu símtólinu aðeins þannig að eyrað sé ekki alveg hulið.

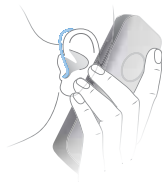

Símaforrit

Ef til vill kýst þú ákveðinn hljóðstyrk þegar þú notar símann. Láttu heyrnarfræðinginn setja upp símakerfi.

- ▶ Stilltu á símakerfið þegar þú notar símann eða notaðu sjálfvirka forritsrofann.

Ef símakerfi eða sjálfvirki kerfisröf er stilltur fyrir heyrnartækin þín er það á listanum í kaflanum „Stillingar“.

Sjálfvirkur forritsrofi (AutoPhone)

Heyrnartækið getur valið símakerfið **sjálfkrafa** þegar þú færir símtólið í grennd við heyrnartækið. Þegar símtalinu er lokið skaltu færa símtólið frá heyrnartækinu og það stillist sjálfkrafa á hljóðnema.

Ef þú kýst að nota þessa aðgerð skaltu biðja heyrnarfræðinginn að gera eftirfarandi:

- Virkja AutoPhone aðgerðina.
- Athuga segulsvið símtólsins.

Heyrnartækið greinir segulsvið símtólsins fyrir sjálfvirka kerfishnappinn. Ekki gefa allir símar frá sér segulsvið sem er nægilega sterkt til að virkja AudioPhone kerfið. Ef þannig er ástatt geturðu notað Siemens AutoPhone segulinn sem er fánlegur sem aukahlutur og setja hann á símtólið.

Sjá notendaleiðbeiningarnar fyrir AutoPhone segulinn um hvernig á að staðsetja hann.



ÁBENDING

Notaðu eingöngu AutoPhone segulinn sem er viðurkenndur. Segullinn er fánlegur hjá heyrnarfræðingnum þínum.

Tónmöskvar fyrir hljóð

Sumir símar og opinberir staðir svo sem leikhús bjóða upp á hljóðmerkið (tónlist og tal) gegnum tónmökva fyrir hljóðsendingar. Heyrnartækin geta tekið beint við merkinu í þessu kerfi – án truflandi hávaða frá umhverfinu.

Hægt er að þekkja kerfi með tónmökva fyrir hljóð á sérstökum merkjum.



Fáðu heyrnarfræðinginn til að setja upp tónmöskvastillingu.

- ▶ Stilltu á tónmöskvastillingu þegar þú ert á stað þar sem tónmöskvakerfi er til staðar.

Ef **tónmöskvakefið** fyrir hljóð er stillt fyrir heyrnartækin þín er það á listanum í kaflanum „Stillingar“.

Tónmöskvakerfi fjarstýring



ÁBENDING

Fyrir heyrnartæki með þráðlausri tengingu: þegar tónmöskvakerfið er virkt getur fjarstýringin myndað þúlsandi tón.

- ▶ Notaðu fjarstýringuna í fjarlægð sem er meiri en 10 cm (4 þumlungar).

Viðhald og umhirða



Til að koma í veg fyrir skemmdir er mikilvægt að þú sinnir heyrnartækjunum og farir eftir einföldum reglum sem verða brátt hluti af daglegum hefðbundnum verkum.

Heyrnartæki

Þurrkun og geymsla

- ▶ Þurrkaðu heyrnartækin yfir nótt.
- ▶ Fáðu nánari upplýsingar hjá heyrnarfræðingi um búnað sem mælt er með til þurrkunar.
- ▶ Ef ekki á að nota heyrnartækin í lengri tíma þarf að geyma þau með rafhlöðuhólfið opið og rafhlöðurnar teknar úr í þurrkunarbúnaði til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif frá raka.

Þrif

Heyrnartækin eru með varnarhúð. En ef heyrnartækin eru ekki þrifuð reglulega geta þau skemmst eða valdið líkamstjóni.

- ▶ Notaðu mjúka, þurra pappírþurrku til að þrifa heyrnartækin daglega.
- ▶ Notaðu aldrei rennandi vatn og ekki skal dýfa tækjunum ofan í vatn.
- ▶ Aldrei skal beita þrýstingi við þrif.
- ▶ Fáðu upplýsingar hjá heyrnarfræðingi um hreinsiefni sem mælt er með, sérstök hreinsisettt eða nánari upplýsingar um hvernig á að halda heyrnartækjunum í góðu ástandi.



Kúplar


Þrif

Eyrnamergur getur safnast upp í kúplunum. Þetta getur haft áhrif á hljóðgæði. Þrífa þarf kúplana daglega.

Eftirfarandi á við um allar gerðir kúpla:

- ▶ Þrífa þarf kúpulinn með mjúkri og þurri pappírspurrku strax eftir að hann er tekinn úr.

Þetta kemur í veg fyrir að eyrnamergurinn verði þurr og harður.

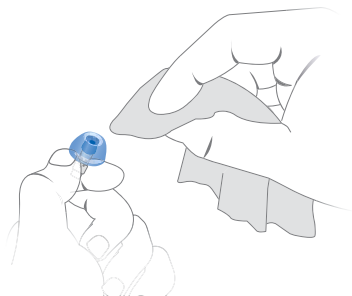

Fyrir smellukúplar:

- ▶ Kreistu toppinn á kúplinum.




Kúpulskipti

Skipta skal um hefðbundna **eyrnatappa** á um þriggja mánaða fresti. Skiptu oftari um ef þú tekur eftir sprungum eða öðrum breytingum á þeim. Aðferðin til að skipta um **hefðbundnum kúplum** er mismunandi eftir gerð kúpulsins. Í kaflanum „Einstakir hlutar og heiti“, hefur heyrnarfræðingurinn merkt við þína gerð af kúplum.

Skript um smellukúpul

Ef þú átt í vandræðum með að fjarlægja **gömlu** smellukúpulinn þarftu að nota sérstaka tækið til þess eða fara eftir leiðbeiningum á umbúðunum á smellukúpunum:

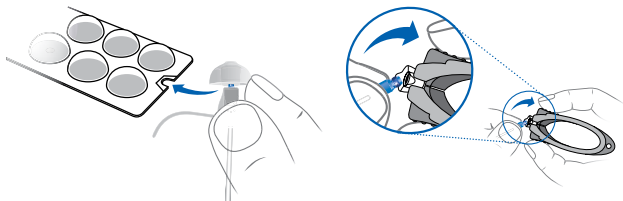

Sérstakur búnaður til að fjarlægja **kúpulubb** er fánlegt sem aukabúnaður.



- ▶ Gættu þess sérstaklega að nýji smellukúpullinn smelli greinilega á sinn stað.



Viðhald fagmanna

Heyrnarfræðingurinn getur séð um vandleg, fagleg þrif og viðhald.

Láta þarf fagmann skipta um sérsníðaðar skeljar og eyrnamergssíur eftir þörfum.

Fáðu upplýsingar frá heyrnarfræðingi um sérstök ráð sem henta þér varðandi viðhald og aðstoð.

Aðrar upplýsingar

Þráðlaus virkni

Heyrnartækin eru með þráðlausa virkni. Þessi virkni samhæfir bæði heyrnartækin:

- Ef þú skiptir um kerfi eða styrk á öðru heyrnartækinu þá breytist **þetta** á hinu tækinu sjálfkrafa.
- Bæði heyrnartækin aðlaga sig sjálfkrafa að hlustunaraðstæðum samtímis.

Þráðlaus virkni gerir notkun fjarstýringar mögulega.

Fylgihlutir

Þeir fylgihlutir sem eru fáanlegir fara eftir gerð heyrnartækisins. Sem dæmi er hægt að fá fjarstýringu, streymibúnað fyrir hljóð eða app fyrir fjarstýringu í snjallsíma.

Fáðu nánari upplýsingar hjá heyrnarfræðingi þínum.

Táknin sem notuð eru í þessum bæklingi



Táknar ástand, sem gæti valdið alvarlegum, umtalsverðum eða minni háttar slysum.



Gefur til kynna hugsanlegt eignatjón.



Ráð og vísbendingar um hvernig á að meðhöndla tækið betur.

Bilanagreining

Vandamál og hugsanlegar lausnir

Hljóðið er dauft.

- Bættu við hljóðstyrkinn.
- Skiptu um rafhlöðu eða settu hana í hleðslu (eftir gerð rafhlöðunnar).
- Þrífðu eða skiptu um kúpul.

Heyrnartækið gefur frá sér ískurhljóð.

- Settu kúpulinn aftur í þannig að hann sitji vel.
- Lækkaðu hljóðstyrkinn.
- Þrífðu eða skiptu um kúpul.

Hljóðið er bjagað.

- Lækkaðu hljóðstyrkinn.
- Skiptu um rafhlöðu eða settu hana í hleðslu (eftir gerð rafhlöðunnar).
- Þrífðu eða skiptu um kúpul.

Vandamál og hugsanlegar lausnir

Heyrnartækið gefur frá sér hljóðmerki.

- Skiptu um rafhlöðu eða settu hana í hleðslu (eftir gerð rafhlöðunnar).
-

Heyrnartækið virkar ekki.

- Kveiktu á heyrnartækinu.
 - Lokaðu rafhlöðuhólfinu varlega að fullu.
 - Skiptu um rafhlöðu eða settu hana í hleðslu (eftir gerð rafhlöðunnar).
 - Gættu þess að rafhlaðan sé rétt sett í.
 - Ræsingartöfin er virk. Bíddu í nokkrar sekúndur og reyndu aftur.
-

Hafðu samband við heyrnarfræðing ef þú lendir í frekari vandamálum.

Þjónustu-upplýsingar

Raðnúmer

Vinstra:

Hægra:

Þjónustudagsetningar

1:

2:

3:

4:

5:

6:

Heyrnarfræðingur

Kaupdagur:

Sérstakar landsupplýsingar



Framleiðandi

Siemens Audiologische Technik GmbH

Gebbertstrasse 125

91058 Erlangen

Þýskalandi

Sími +49 9131 308 0

Skjal nr. A91SAT-02374-99T02-7600 IS

Pöntun/hlutarnr. 108 264 72 | Master Rev03, 08.2014

© Siemens AG, 08.2014

www.siemens.com/hearing