

WIDEX **UNIQUE™**

Notkunarleiðbeiningar  
**WIDEX UNIQUE™ Fjölskyldan**

U-FS model  
Hátalari-í-eyra



**WIDEX**<sup>®</sup>  
HIGH DEFINITION HEARING

## **Pitt Widex® heyrnartæki**

(Fillist út af heyrnarfræðingi)

Þitt tæki (tegund og númer):

PROGRAM	
<input type="checkbox"/> Universal	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
<input type="checkbox"/> Quiet	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
<input type="checkbox"/> Transport	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
<input type="checkbox"/> Urban	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
<input type="checkbox"/> Party	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
<input type="checkbox"/> Music	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
<input type="checkbox"/> T	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
<input type="checkbox"/> M+T	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
SPECIAL PROGRAMS	
<input type="checkbox"/> Zen	<input type="checkbox"/> Audibility Extender

<b>PROGRAM</b>	
<input type="checkbox"/> Phone	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
<b>SMARTTOGGLE PROGRAMS</b>	
<input type="checkbox"/> Zen+	<input type="checkbox"/> Audibility Extender
<input type="checkbox"/> Phone+	<input type="checkbox"/> Audibility Extender

**NOTE**

Lesið þessar leiðbeiningar vandlega áður en þú byrjar að nota Widex heyrnartækin þín.

# Innihald

<b>WIDEX HEYRNARTÆKIN ÞÍN.....</b>	<b>7</b>
<b>Velkomin til Widex.....</b>	<b>7</b>
<b>Mikilvægar öryggisupplýsingar.....</b>	<b>10</b>
<b>HEYRNARTÆKIN.....</b>	<b>14</b>
Til hvers er tækið ætlað .....	14
Ætluð notkun.....	15
Rafhlöður.....	15
Hljóðmerki.....	20
Hvernig þekki ég hægra og vinstra tæki?.....	22
Að kveikja og slökkva á tækjunum.....	23
Tækin sett á eyrun og tekin af.....	25
Hljóðstillingar.....	27
Kerfisstillingar.....	30
Notkun síma við heyrnartæki.....	35
<b>HREINSUN.....</b>	<b>36</b>
<b>Búnaður.....</b>	<b>36</b>

Hreinsun heyrnartækja.....	36
FYLGIHLOTIR.....	<b>39</b>
<b>BILANIR/VANDAMÁL.....</b>	<b>41</b>
<b>REGULATORY INFORMATION.....</b>	<b>45</b>
EC directives.....	45
FCC and IC statements.....	47
TÁKN.....	<b>53</b>

# Widex Heyrnartækin þín

## Velkomin til Widex

Til hamingju með nýju heyrnartækin þín.

Notaðu tækin reglulega, þó að það geti tekið nokkurn tíma að venjast þeim. Bestur árangur næst hjá þeim sem nota tækin við öll tækifæri.


### NOTE

Ekki er víst að heyrnartækin þín líti nákvæmlega eins út og tæki á myndum í þessum bæklingi.

Við áskiljum okkur einnig rétt á að gera aðrar breytingar ef nauðsyn krefur.

## Útlit heyrnartækjanna


Myndin sýnir heyrnartækin án leiðsla í eyru. Sá hluti tækjanna sem fer í eyrun samanstendur af leiðslu/vír og kúpli. Heyrnarfræðingurinn mun útskýra hlutverk einstakra hluta nánar.

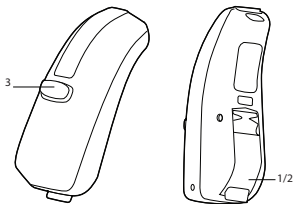



1. On/off rofi
2. Rafhlöðu-skúffa
3. Kerfishnappur


## Mikilvægar öryggisupplýsingar







Lesið eftirfarandi vandlega áður en þér hefjið notkun tækjanna.


 Heyrnartæki og rafhlöður má ekki gleypa! Það getur verið hættulegt og jafnvel lífshættulegt. Ef þú gleypir tækin eða rafhlöður, hafið samband við lækni samstundis.


 Taktu heyrnartækin af þér þegar þú ert ekki að nota þau. Gott er að lofta eyrun og koma í veg fyrir sýkingar í eyrnagöngum.


 Hafið samband við lækni ef grunur leikur á sýkingu í eyrum.

 Takið heyrnartækin af áður en farið er í sturtu, í sundlaug og áður en hárburrka er notuð.

-  Fjarlægð heyrnartækin áður en þú berð á þig krem, hárgel eða úðar ilmefnum.
-  **EKKI** þurkka heyrnartæki í örbylgjuofni - það eyðileggur heyrnartækin!
-  Ekki nota heyrnartækin annarra og leyfið aldrei öðrum að nota tækin þín.
-  Ekki nota heyrnartæki við hættulegar aðstæður s.s. nálægt gasi eða þar sem sprengihætta er.
-  Geymið heyrnartæki, rafhlöður og fylgihluti þar sem börn ná ekki til.
-  Reynið aldrei að opna eða gera við heyrnartækin sjálf. Hafið samband við sölu- eða þjónustuaðila ef tækin bila.

 Heyrnartæki þín nota útvarpssenditækni. Fylgið ávallt leiðbeiningum um notkun slíkra tækja ef takmarkanir gilda.

 Heyrnartækin þín eru kraftmikil og geta framleitt hljóð sem eru yfir 132dB styrkleika. Þau geta því valdið skaða á heyrnarleyfum þínum.

 Haldið heyrnartækjum frá miklum hita og mjög röku umhverfi. Þurrkið þau fljótt ef þau blotna eða ef þú svitnar mikið.

Best er að geyma heyrnartækin við hita- og rakastig sem hér segir: -18°C til +40°C (-0,4°F to 104°F) og rakastig 10%-95% rH.

Geymsla og flutningur við allt að 60°C (140°F) og 10%-95% rHer mögulegur í stuttan tíma (hámark 2 vikur).

Heyrnartækin eru hönnuð til að virka við hitastig frá 0°C (32°F) til 50°C (122°F).

Nánari upplýsingar um heyrnartækin má finna á vefsíðu framleiðandats: [www.widex.com](http://www.widex.com).

## Heyrnartækin

### Til hvers eru þau ætluð

Þessi heyrnartæki eru ætluð einstaklingum með væga til alvarlega heyrnarskerðingu (10dB HL-100 dB HL)] af ýmsum orsökum.

Heyrnartækin skulu stillt af sérmenntuðum heyrnarfræðingum (læknar, heyrnarfræðingar, heyrnartæknafræðingar) sem fengið hafa tilhlýðilega þjálfun.

## Ætluð notkun

Heyrnartækin magna loftleidd hljóð og er hægt að nota við öll venjuleg hlustunarskilyrði. Tækin geta verið útbúin með s.k. Zen kerfi sem framleiðir slökunarhljóð (tónlist, suð, annað) fyrir þá sem þess óska.

## Rafhlöður

Þessi tæki nota **type 312 zinc-air** rafhlöður.

Notið ávallt nýjar rafhlöður og aðeins þá tegund sem mælt er með fyrir heyrnartæki þín.

## NOTE

Gætið þess að rafhlaðan sé hrein áður en hún er sett í heyrnartækið. Annars gæti það truflað virkni heyrnartækjanna.



EKKI reyna að endurhlaða rafhlöðurnar. Þær gætu sprungið.



Aldrei skilja rafhlöður eftir í heyrnartækjum ef þau eru geymd yfir lengri tíma. Rafhlöður geta lekið og valdið skemmdum. .




Fylgið leiðbeiningum um eyðingu notaðra rafhlaða og fylgist vel með líftíma þeirra á pakkningum. Ekki nota útrunnar rafhlöður.

### **Hleðsla rafhlöðu fellur**


Heyrnartækin gefa frá sér hljóðmerki þegar rahlaðan tæmist. Þó er mögulegt að ekki heyrist aðvörunartónn. Því mælum við með því að hafa ávallt aukarafhlöður með sér.

### **Skipt um rafhlöður**

Til að skipta um rafhlöðu fylgið eftirfarandi leiðbeiningum::

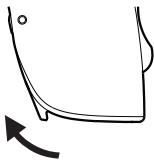


Notið fingurnögl til að ýta á hakið á botni tækis. Opnið rafhlöðuskúffuna varlega og fjarlægið notaða rafhlöðu.

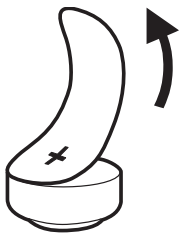

Fjarlægjð límniðann af  
nýrri rafhlöðu og passið  
að rafhlaðan sé hrein.  
Gott er að láta hana  
"anda" í 1 mínútu.

Setjið síðan nýju rafhlöðuna í eins og sýnt er.

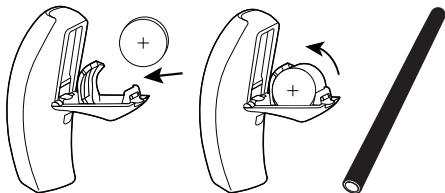

Lokið skúffunni. Ef hún lokast ekki auðveldlega er rafhlaðan ekki rétt sett í.

Ef þú notar ekki tækin í nokkra daga skaltu fjarlægja rafhlöðunar úr tækjunum.

## **NOTE**

Varist að missa tækin - hafið mjúkt undirlag þegar skipt er um rafhlöður.

## **Hljóðmerki**

Heyrnartækin spila ýmiss hljóðmerki til að láta þig vita af mismunandi hlutum s.s. þegar skipt er um hljóðkerfi, þegar hækkað er í tækjum o.s.frv.

Hljóðmerkin eru ýmist tónar eða raddmerki (á ensku). Heyrnarfræðingur þinn getur aðstoðað þig við stillingar hljóðmerkja.

<b>Program 1</b>	Message/eitt stutt hljóðmerki
<b>Program 2</b>	Message/tvö stutt hljóðmerki
<b>Program 3</b>	Message or þrjú stutt hljóðmerki
<b>Program 4</b>	Message/eitt stutt og eitt langt merki
<b>Program 5</b>	Message/eitt langt og tvö stutt merki
<b>Zen+</b>	Message/tónn

Þú getur beðið heyrnarfræðinginn að slökkva á hljóðmerkjum sem þú telur ekki þörf á

### **Töpuð þörun tækja**

(Á aðeins við um þráðlausa 440-tegund tækja)

Hægt er að virkja aðvörun í vissum heyrnartækjum þannig að tækin láti vita ef tenging á milli v- og h-tækis tapast. Þá spilast orðsending í eyrað.

## **Hvernig má þekkja vinstra frá hægra tæki**


Heyrnartæki ætlað hægra eyra er með RAUTT merki.

Heyrnartæki fyrir vinstra eyra er með BLÁTT merki.

## Að kveikja og slökkva á heyrnartækinu

Til að kveikja á tækinu er rafhlöðuskúffu lokað.

Tækið spilar þá hljóðmerki sem gefur til kynna að tækið sé nú í gangi.

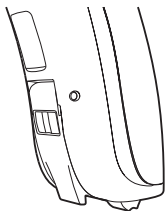

Til að slökkva á tækinu er rafhlöðuskúffan opnuð lítillega.



**NOTE**


Þú getur haldið þétt utan um heyrnartæki til að kanna hvort að kveikt er á því. Tækið flautar/ýlir ef það er í gangi.

Munið að slökkva á tækjum sem ekki eru í notkun.

## Tæki sett á og fjarlæggt

Komið fyrst hátalarum í hlustina með því að halda um neðsta hluta leiðslunnar. Gott er að toga eyrað aðeins upp og aftur til að auðvelda þetta.

Smeygið síðan heyrnartækin aftur fyrir eyrað. Tækið á að hvíla þægilega á eyranu, þétt við höfuðið.

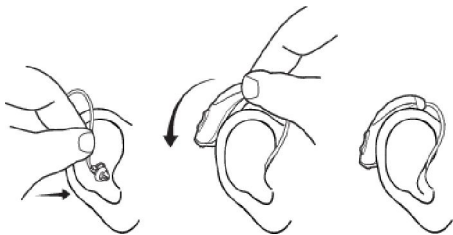

Hægt er að stilla þessi heyrnartæki við mismunandi hluta sem fara í eyra. Fáíð leiðbeiningar mismunandi hlustarstykki/hátalara hjá þjónustuaðila.


**NOTE**

Ef heyrnartæki situr ekki þægilega eða veldur óþægindum, ertingu, roða á húð eða annað, hafið samband við heyrnarfræðing.

**Heyrnartæki fjarlæggt**

Byrjið á að taka heyrnartækið frá eyranu.

Dragið síðan hlustarstykkið varlega út úr hlustinni með því að toga í neðsta hluta leiðslunnar.

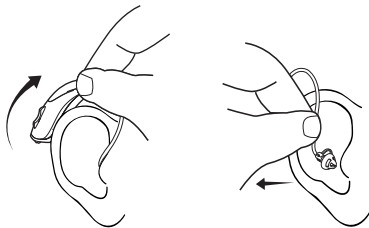

## Hljóðstillingar

Heyrnartækin stilla hljóð eftir aðstæðum og hljóðumhverfi hverju sinni.

Ef þú notar fjarstýringu getur þú einnig aðlagð hljóðstyrk handvirkt þér til þægindaauka. Heyrnarfræðingurinn getur veitt þér nánari upplýsingar um möguleika þessa.

Í flestum tilvikum hafa slíkar breytingar áhrif á bæði heyrnartækin, þetta fer þó eftir stillingum.

Tónn heyrir þegar hækkað eða lækkað er í tækinu (það er hægt að slökkva á slíkri aðvörun). Stöðugur tónn heyrir þegar hæstu/lægstu stillingu er náð.

Hægt er að þagga í heyrnartækjum með því að:

- Halda niðri lækkunar-takka fjarstýringar þar til stöðugur tónn heyrir

**Hægt er að kveikja aftur á hljóðinu með því að:**

- Ýta á hækkunar-takkann eða or
- Skipta um kerfisstillingu

Breytinar á hljóði afturkallast þegar slökkt er á tækinu eða skipt er um kerfisstillingu (prógram).

## Kerfi-Stillingar

<b>PROGRAM</b>	<b>Notkun</b>
Universal	Allar venjulegar aðstæður
Quiet	Sérstök hlustunarskilyrði í hljóðu umhverfi
Transport	Við erfið hlustunarskilyrði s.s. í bíl, strætó, flugvél.
Urban	Í breytilegu hljóðumhverfi s.s. á vinnustað, í verslunum o.s.frv
Party	Við hávær skilyrði, fjölmenni, samkvæmi

<b>PROGRAM</b>	<b>USE</b>
Music	til að hlusta á tónlist
T	Sérstakt kerfi fyrir T-spólu T-spólu tækni tengir heyrnartæki beint við hljóðgjafa (þar sem tónmökvar eru til staðar)
M+T	Þetta kerfi blandar saman tónmökva og hljóðnema heyrnartækjanna. Beint hljóðstreymi OG umhverfishljóð
<b>SPECIAL PRO- GRAMS</b>	

<b>PROGRAM</b>	<b>USE</b>
Zen	Spilar tóna eða hljóð til slökunar
Phone	Kerfi sem er sérætlað til notkunar með sínum
<b>SMARTTOGGLE PROGRAMS</b>	
Zen+	Svipað kerfi og Zen en býður fjölbreyttari hljóð og tóna

PROGRAM	USE
Phone+	Hjálpar notanda til að nýta símtöl betur. Heyrnartæki við síma sendir hljóðið í hitt heyrnartæki svo notandi fær símtalið í bæði eyru.

#### NOTE

**Aðeins er hægt að hafa einn SmartToggle kerfi í gangi.**

Það er mögulegt að virkja s.k. Audibility Extender á heyrnartækjum þínum. Spurðu heyrnarfræðing hvort að það gæti nýst þinni heyrnarskerðingu.

Það er alltaf hægt að breyta og endurstilla kerfi eftir því sem aðstæður og smekkur notanda breytist.

## **Skipt um kerfi**

Til að breyta um kerfi, ýttu aðeins á kerfis-hnappinn.

### **NOTE**

Phone+ kerfi er ekki hægt að stjórna með fjarstýringu.

### **Zen+**

Til að kveikja á þessu kerfi, haltu kerfis-hnappi niðri í meira en 1 sekúndu. Síðan getur þú valið mismunandi hljóð/tóna stuttum þrýstingi á hnappinn. Slökkt er á kerfinu eins: haltu kerfis-hnappi niður í meira en 1 sek..

### **Phone+**

Til að kveikja á þessu kerfi, haltu kerfis-hnappi niðri í meira en 1 sekúndu. Slökkt á sama máta.

## Hvernig nota skal síma við heyrnartæki




Haltu símanum aðeins ofan og aftan við eyrað en ekki þannig að hátalari beinist beint að hlustinni. Hátalari símans þarf að vísa að heyrnartækinu aftan við eyrað.

## Hreinsun

### Tæki

Eftirtalin hreinsitæki fylgja með heyrnartækjum þínum.

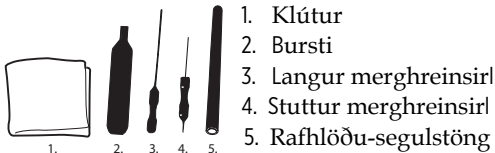

### Hreinsun heyrnartækjanna

Hreinsun og góð umhirða tryggir betri virkni og endinu og gerir þau þægilegri í notkun.



Strjúkið af heyrnartækj  
-unum með mjúkum  
klút (gæti fylgt með  
tækjum þínum!)

Ef hljóðnema-op eru enn  
stífluð skaltu hafa samband  
við þjónustuaðila

Ef heyrnartækin blotna eða þú svitnar mjög mikið  
skalt þú þurrka tækin eins fljótt og auðið er. Til eru  
sérstök þurrkbox til þessara nota (Widex Dry-Go).  
Heyrnarfræðingar veita frekari upplýsingar

Hafðu rafhlöðuskúffuna opna til að þurrka tækið betur.

Upplýsingar um þurrkun og meðferð  
hlustarstykkja fylgja þeim.



Ekki nota neina hreinsivökva eða sóttgreinsiefni til hreinsunar heyrnartækjanna.



Hreinsið heyrnartækin daglega og skoðið hvort að tækin eru heil. Ef heyrnartæki brotnar þannig að litlir hlutir sitja eftir í hlustinni skalt þú hafa samband við lækni. Reynið aldrei að fjarlægja aðskotahluti úr eyrum sjálf.

## Fylgihlutir

Hægt er að nota margvíslega fylgihluti með heyrnartækjum þínum. Ræddu við heyrnarfræðing þinn til að kanna hvort að einhver þessara fylgihluta geta gagnast þér.

<b>Nafn</b>	<b>Hlutverk</b>
RC-DEX	fjarstýring
TV-DEX	fil að hlusta á sjónvarp/útvarp
PHONE-DEX	auðveldar notkun heimasíma
FM+DEX	streymir hljóð og stuttbylgju
T-DEX	tengir heyrnartæki við síma í með tónmökva

<b>Nafn</b>	<b>Hlutverk</b>
UNI-DEX	tengir heyrnartæki við farsíma
CALL-DEX	einföld þráðlaus tenging við farsíma phones
COM-DEX	þráðlaus tenging við farsíma og önnur tæki í gegnum bluetooth

## Bilanir og vandamál

hér á eftir fylgja nokkrar ráðleggingar ef heyrnartækin hættu að virka eða vandamál koma upp. Ef þessi ráð hjálpa ekki skalt þú hafa samband við þjónustuaðila.

<b>Vandamál</b>	<b>Möguleg orsök</b>	<b>Lausn</b>
Heyrist ekkert í heyrnartækinu	Ekki kveikt á	Gáðu hvort að rafhlöðuskúffa er alveg lokuð
	Rafhlaða er ónýt	Setjið nýja rafhlöðu í tækið

Vandamál	Möguleg orsök	Lausn
Heyrist ekki nógu hátt í tækinu	Eyrnamergur stíflar eyrað	Hafðu samband við lækni
	Breyting á heyrn þinni	Hafðu samband við lækni
Flautar / ýlfrar stöðugt í tækinu	Eyrnamergur stíflar eyrað	Hafðu samband við lækni
Tvö heyrnar- tæki virka ekki saman	Tenging milli tækja hefur rofnað	Slökkva á tækjum og kveikja aftur

Vandamál	Möguleg orsök	Lausn
<p>Heymartækin svara ekki fjarstýringu eða fylgihlut</p>	<p>a. Of langt á milli tækja og fjarstýringar</p> <p>b. Sterkt segulsvið trular tækin</p> <p>c. Heymartæki og fjarstýring ekki pöruð saman</p>	<p>a. Færðu fjarstýringu nær tækjunum</p> <p>b. Færðu þig burt frá orsök segulsviðs</p> <p>c. Láttu þjónustuaðila athuga pörun tækjanna</p>



## Regulatory information

### EC directives

#### Directive 1999/5/EC

Hereby, Widex A/S declares that this U-FS is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity according to 1999/5/EC can be found at:

<http://widex.com/doc>



## Information regarding disposal



Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, components and substances that can be hazardous and present a risk to human health and the environment when waste electrical and electronic equipment (WEEE) is not handled correctly.

Do not dispose of hearing aids, hearing aid accessories and batteries with ordinary household waste. (Continues on next page).

(Continued) Hearing aids, batteries and hearing aid accessories should be disposed of at sites intended for waste electrical and electronic equipment, or given to your hearing care professional for safe disposal. Proper disposal helps to protect human health and the environment.

## **FCC and IC statements**

FCC ID: TTY-UFS

IC: 5676B-UFS

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter-

mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

#### Industry Canada Statement / Déclaration d'industrie Canada

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.



Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.



Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :



- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



## Symbols

Symbols commonly used by Widex A/S in medical device labeling (labels/IFU/etc.)


Symbol	Title/Description
	<p><b>Manufacturer</b></p> <p>The product is produced by the manufacturer whose name and address are stated next to the symbol. If appropriate, the date of manufacture may also be stated.</p>
	<p><b>Catalogue number</b></p> <p>The product's catalogue (item) number.</p>

Symbol	Title/Description
	<p data-bbox="270 213 584 242"><b>Consult instructions for use</b></p> <p data-bbox="270 270 866 379">The user instructions contain important cautionary information (warnings/precautions) and must be read before using the product.</p>
	<p data-bbox="270 412 370 441"><b>Warning</b></p> <p data-bbox="270 469 866 534">Text marked with a warning symbol must be read before using the product.</p>

Symbol	Title/Description
	<p><b>WEEE mark</b></p> <p>“Not for general waste”</p> <p>When a product is to be discarded, it must be sent to a designated collection point for recycling and recovering to prevent the risk of harm to the environment or human health as a result of the presence of hazardous substances.</p>
	<p><b>CE mark</b></p> <p>The product is in conformity with the requirements set out in European CE marking directives.</p>

Symbol	Title/Description
	<p><b>RCM mark</b></p> <p>The product complies with electrical safety, EMC and radio spectrum regulatory requirements for products supplied to the Australian or New Zealand market.</p>
	<p><b>Interference</b></p> <p>Electromagnetic interference may occur in the vicinity of the product.</p>



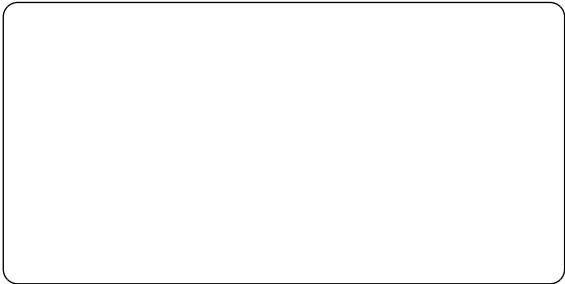

**WIDEX A/S**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngby, Denmark  
[www.widex.com](http://www.widex.com)

**CE** 0459

**Manual no.:**  
9 514 0317 001 #01  
**Issue:**  
2015-09

