



Kveikja/Slökkva takki

Ýta í 2 sekúndur

iCom takki

Raddstýrð hringing	Ýta í 2 sekúndur
Endurval	Ýta 2x, stutt
Svara eða leggja á	Ýta 1x, stutt
Slökkva á hringingu	Ýta í 2 sekúndur

Möguleikar með iCom

Eftirfarandi er ekki tekið fram í almennu leiðbeiningunum.

Raddstýrð hringing

Leitið upplýsinga í leiðbeiningunum fyrir símann. Ýtið á iCom takkann í 2 sekúndur. Eftir að þú þýtið hljóðið heyrir segir þú nafnið á þeim sem ætlunin er að hringja í.

Endurval

Til að hringja í síðasta númer sem hringt var í, ýttu tvisvar á iCom takkann. Síðasta númer sem hringt var í tengist og hringt í það.*

*Síminn verður að bjóða upp á þennan möguleika. Kveikt verður að vera á iCominum en ekkert símtal, tónlist eða FM-hlustun má vera í gangi (aðeins vinstra LED hleðsluljósíð blikkar).

Hljóðlás


Hljóðmerkið getur dottið út ef hlé verður á samræðum við notkun FM-móttakara, einnig við notkun hljóðkapals ef tónlistin lækkar eða hættir.

Þá er ýttu 1x stutt á Kveikja/slökkva takkann til að læsta á sendingu hljóðmerkis.

Í upphafi

Hlaðið rafhlöðuna í iCominum

Hægt er að nota iCominn þótt hann sé í hleðslu.

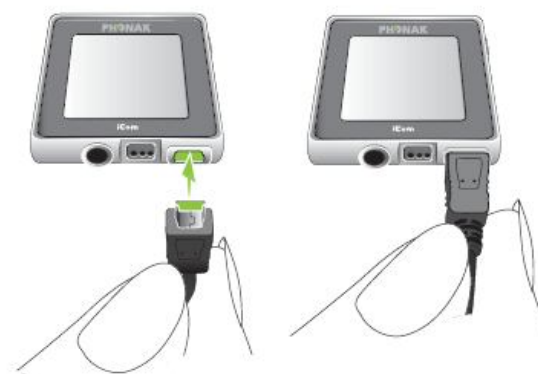

Uppsetning á Bluetooth tækjum

Áður en byrjað er að nota iCominn með bluetooth tækjum þarf að para tækin saman. Skoðið aðalleiðbeiningarnar til að fá nánari upplýsingar. Kóðinn sem þarf að setja inn er "0000".



Að nota iCom með farsíma

Til að taka á móti innhringingu í farsímann þarf að ýta stutt á iCom takkann. Þá mun rödd þess sem hringir heyrast í heyrnartækjunum. Mundu að þín rödd er móttækin í iCominum.

Notkun hljóðgjafa og FM

Tenging í gegnum hljóðkapal



Tenging í gegnum FM-kerfi



- Til að gera hlé/endurræsa flutning hljóðs skal ýta á iCom takkann
- Til að slökkva á hljóðinu, slökkvið þá á hljóðgjafanum eða takið hljóðkapalinn úr sambandi
- Til að stöðva FM-móttöku, slökkvið þá á FM-móttakaranum eða takið FM-móttakarann úr sambandi

Ef hljóðið í gegnum kapalinn eða FM-móttakarann er ekki stöðugt við sendingu ýtið þá á kveikja/slökkva takkann til að læsa hljóðmóttökunni

Til að athuga hvaða útgáfan af iCom þú ert með geturðu ýtt á kveikja/slökkva takkann þegar iCominn er í biðstöðu

Ef appelsínugult ljós blikkar tvisvar er þetta útgáfa 2 af iCom.



Inniheldur: raddstýrða hringingu, endurval og hljóðlás

Talaðu við heyrnarfræðing varðandi nánari aðstoð.

Ljósmerki

(Til að fá frekari leiðbeiningar skoðið leiðbeiningabæklinginn)

Rautt, eitt blikk
= Slökknar á iCom



Grænt
= Kviknar á iCom



Gult, blikkar hratt
= Læst fyrir
hljóðsendingu



Gult, stöðugt
= Hljóðsending



Gult, blikkar rólega
= Hljóðsending á bið




Blátt
= Sýnir að bluetooth
er í gangi



Bluetooth QD ID BO 14140

Lesið iCom leiðbeiningabæklinginn vandlega. Leggið sérstaklega áherslu á þáttinn um "mikilvægar upplýsingar" og þar sem

viðvörðunarkerki  er til staðar sem tengist viðeigandi viðvörðun.

www.phonak.com



PHONAK

life is on