


Naída Super Power og Ultra Power

Heyrnartæki með hlustarstykki

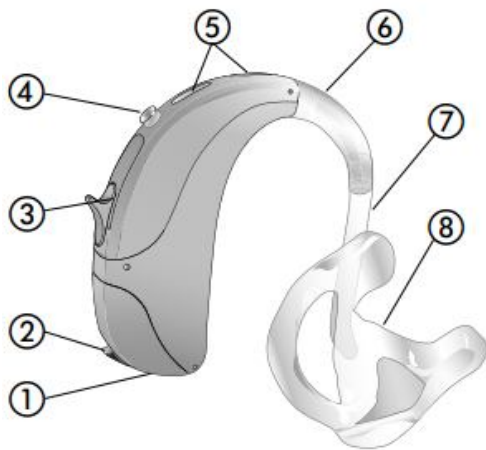

1. Hægri og vinsti merking
2. Rafhlöðuhólf, með vind og veðrahlíf, sem einnig er rofi til að kveikja og slökkva á tækinu
3. Styrkstillir
4. Kerfishnappur
5. Hljóðnemaop með vind- og veðravörn
6. Bogi
7. Mjúk slanga
8. Sérsmíðað hlustarstykki

Hægri og vinstir merking

Hægri = Rautt
Vinstri = Blátt



Skript um rafhlöðu:

Naída SP notar rafhlöður nr. 13 (appelsínugul pakkning)

Naída UP notar rafhlöður nr. 675 (blá pakkning)

Opnið rafhlöðu hólfid og setið nýju rafhlöðuna í. Hægt er að sjá hvernig rafhlaðan á að snúa inni í rafhlöðuhólfinu.



Styrkstillir:

Hægt er að hækka eða lækka hljóðið í tækinu með styrkstilli. Til að hækka er ýtt upp á við en til að lækka er ýtt niður á við.



Athugið! Þíp hljóð gefur til kynna að styrkstillirinn sé virkur, tvö þíp að ekki sé hægt að hækka meira í tækinu.

Ef þú vilt ekki nota styrkstillinn getur heyrnarfræðingur gert hann óvirkan.

Hlustunarkerfi

Sjálfvirkt val á milli kerfa

Naíða stillist sjálfvirkt eftir mismunandi hljóðumhverfi.

Val á fleiri kerfum

Hægt er að vera með verið einstaklingsbundin kerfi fyrir sérstakar hlustunaraðstæður td. tónmöskvakerfi. Þú hefur aðgang að mismunandi kerfum með kerfishnappnum. Heyrnarfræðingur getur sett inn kerfi fyrir þig.



Kerfishnappurinn gefur þér möguleika á að skipta á milli sjálfvirks kerfis og einstaklingsbundinna kerfa. Stuttur lagstúfur staðfestir valið á sjálfvirka kerfinu.

Ef þú ert með tvö heyrnartæki þarft þú aðeins að gera aðgerðirnar virkar í öðru tækinu og þá mun hitt tækið stilla sig eins.

Heyrnartækið sett í eyrað:

Notaðu þá hendi sem er sömu megin og eyrað sem heyrnartækið á að fara í. Taktu um tappann milli þumalfingurs og vísifingurs.

Lyftu hendinni að eyranu og passaðu að hlustarstykkið snúi að hlustinni.

Settu hlustarstykkið í hlustina. Ef það reynist erfitt að koma því fyrir getur verið gott að toga eyrað aðeins aftur og upp um leið og stykkinu er komið fyrir.

Settu nú heyrnartækið bak við eyrað. Passaðu að ekki snúist upp á slönguna.

Til að taka tækið úr eyranu skaltu taka um hlustarstykkið – ekki slönguna – og toga það varlega úr eyranu.



Símar:

Þegar talað er í síma með bak-við-eyrað heyrnartæki þarf hátalarinn í símtólinu að liggja við hljóðnema heyrnartækisins. Misjafnt er eftir símtækjum hvað styrkurinn er mikill og hversu nákvæmlega símtólið þarf að liggja upp að heyrnartækinu.



Vind og veðravörn

Á tækjunum er vind og veðravörn til að verja hátalarana og rafhlöðuhólfið frá ryki, raka og vatni. Endingin á hlífunum getur verið upp að nokkrum mánuðum en það fer eftir umhverfinu. Gott er að venja sig á að skipta reglulega um hlífarnar, svo sem eins og einu sinni í mánuði. Skítugar hlífur hafa áhrif á hljómgæðin í tækjunum, skilningur í hávaða getur minnkað, hljóðið getur orðið almennt lægra ofl. Með tímanum lærist hve oft þarf að skipta um hlífur. Fyrir börn er ráðlagt að skipta um einu sinni í mánuði.



- Rafhlöðuhólfið og kerfishnappsvörnin þurfa að vera lokuð.
- Allar þrjár vind- og veðurhlífarnar þurfa að vera rétt settar á.

Mikilvægt!

1. Notið alltaf réttar rafhlöður. Þú getur skilað notuðum rafhlöðum til Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar.
2. Þegar þú ert ekki að nota heyrnartækið hafðu þá rafhlöðuhólfið opið þannig að hugsanlegur raki þorni.
3. Ef þú ætlar ekki að nota heyrnartækið í lengri tíma geymdu það þá í öskjunni sem það kom í. Taktu rafhlöðurnar úr og láttu rafhlöðuhólfið vera opið. Gakktu úr skugga um að tækið sér þurrt áður en þú lokar öskjunni.
4. Skýldu heyrnartækjunum gegn raka og hita. Taktu heyrnartækin alltaf af þér áður en þú ferð í sturtu, bað eða að synda. Ekki geyma heyrnartækin í heitum glugga eða í bílnum.
5. Það getur verið gott að eiga þurrkbox fyrir heyrnartækin. Heyrnarfræðingurinn getur ráðlagt þér um þrif á tækinu. Notaðu aldrei sápu eða önnur hreinsiefni á tækið.
6. Hárlakk, andlitskrem og aðrar snyrtivörur geta skemmt heyrnartækið. Taktu af þér tækin meðan þú setur snyrtivörur á þig.
7. Ef þú finnur fyrir eymslum eða kláða undan tækinu hafðu þá samband við heyrnarfræðing.
8. Ef heyrnartækið virkar ekki þrátt fyrir að þú hafir skipt um rafhlöður hafðu þá samband við Heyrnar- og talmeinastöðina. Ef þú er með fjarstýringu við tækin mundu þá eftir að taka hana með ásamt heyrnartækjunum.